

# GenuTrain® S

Stabilisation renforcée de l'articulation du genou grâce à des barres articulées latérales



Pelote



Renforts latéraux articulés

## INDICATIONS

- Instabilités articulaires (légères à modérées)
- Gonarthrose
- Arthrites (par ex. arthrite rhumatismale)

## AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- La décharge et le guidage du genou sont assurés par des barres articulées latérales en association avec le système de sangles disposé tout autour de la cuisse et de la jambe
- Ultra-plat et réglable individuellement avec les sangles de traction à fermeture autoagrippante micro
- Confort de port élevé grâce au tricot Train respirant, absorbant l'humidité, doté d'un creux spécifique au niveau du genou et de bords à pression réduite
- Stimulation de la stabilisation articulaire neuromusculaire grâce à l'activation des capteurs proprioceptifs
- Réduction de la douleur par l'effet de massage utilisant différentes variations de pression sur les structures molles parapatellaires durant le mouvement, grâce à la pelote visco-élastique
- Accélération de la résorption des œdèmes et des épanchements grâce à l'effet de compression et de massage du tricot élastique

## LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Tricot Train
- + Zone confort
- + Mesure numérique

## OPTIONS DE COMMANDE

**Coloris :** nature, noir, titane

**Modèles :** à droite, à gauche

### En option :

Bord antiglisse en silicone, confection sur mesure (titane)

## CONSEILS D'UTILISATION


- Les barres articulées anatomiques peuvent être mises en forme thermoplastique et peuvent être adaptées à l'anatomie individuelle

TAILLE	1	2	3	4	5	6	7	RÉFÉRENCE
Circonférence en haut (cm)	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59	110 1130 40*0 +0°
Circonférence en bas (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-49	
ACL droit 404644...	5108211	5108228	5108235	5108242	5108259	5108266	5871337	
ACL gauche 404644...	5108273	5108280	5108297	5108303	5108310	5108327	5871344	
ACL droit 404644...	5107979	5107986	5107993	5108006	5108013	5108020	5871290	
ACL gauche 404644...	5108037	5108044	5108051	5108068	5108075	5108082	5871306	

\* = coloris (1) nature, (7) noir, (8) titane  
 + = modèle (6) à droite, (7) à gauche  
 ° = taille (1 - 7)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser notre bloc de commande sur mesure ou le formulaire de commande sur mesure de la page 86 pour des points de mesure précis.

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie. Lire la notice d'instructions avant utilisation.

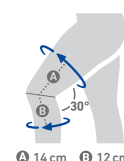

BASE DE  
REMBOURSEMENT  
LPPR  
**102,29 €**

Valable uniquement en France

Code LPPR:  
7148770