

# ManuLoc® long

Immobilisation du poignet et des parties de l'avant-bras




Baleine métacarpienne et renforts latéraux



Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons



Fermeture « velcro » avec arrêt anti-retour



## INDICATIONS

- États inflammatoires post-traumatiques ou post-opératoires, par ex. à la suite de traitements post-plâtrage en cas de fractures du radius
- Applications pré-opératoires
- Syndrome du canal carpien (modéré)
- Tendovaginite (modérée avec douleur au repos et pendant la nuit)
- Luxations / Contusions
- Arthrose (modérée)

## PROUVÉ PAR ÉTUDE<sup>Δ</sup>

- **Amélioration fonctionnelle quotidienne de 22 %**
- **Reprise d'activité après chirurgie en 6 semaines**

## AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- Sécurisation du poignet en extension comme en flexion, mais aussi radialement et du côté ulnaire à l'aide des renforts rallongés en aluminium
- Limitation des mouvements de rotation dans le poignet via le levier plus long de l'orthèse
- L'orthèse empêche les faux mouvements de la région distale et proximale du poignet
- Grande liberté de mouvement du pouce grâce aux deux ouvertures pour le pouce situées des deux côtés, port à gauche ou à droite possible
- Immobilisation en position fonctionnelle lors de la préhension opérationnelle grâce à une baleine métacarpienne ajustable
- Mise en place facile de l'orthèse avec une seule main grâce à des fermetures « velcro » très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur les sangles
- Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons pour une plus grande longévité et une esthétique améliorée, au niveau du coude, la peau plus sensible est protégée par un rembourrage / un revêtement moelleux

## CONSEILS D'UTILISATION

- Les renforts latéraux en aluminium et la baleine métacarpienne avec fentes d'aération sont ajustables individuellement

## LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Zone confort
- + Mise en place facilitée
- + Mesure numérique

## OPTIONS DE COMMANDE

**Coloris :** titane

**Modèles :** universel (ouvertures pour le pouce des deux côtés)

TAILLE	0	1	2	3	RÉFÉRENCE
Circonférence poignet (cm)	12–15	14–18	17–21	20–26	120 5340 2082 00°
ACL	4046445791093	4046445791109	4046445791116	4046445791123	

° = taille (0–3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie. Lire la notice d'instructions avant utilisation.


<sup>Δ</sup> Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016. À lire en intégralité sur le site [bauerfeind-life.de](http://bauerfeind-life.de)

**BASE DE REMBOURSEMENT LPPR**

**56,64 €**

Valable uniquement en France

Code LPPR: 7149047

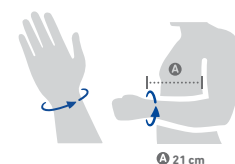

21 cm

recommandé à partir d'une longueur d'avant-bras de 21 centimètres, mesurée à partir du poignet