

ManuLoc® Rhizo long Plus

Immobilisation de l'ensemble de la main et des parties de l'avant bras avec ouverture pour le pouce



Baleine métacarpienne et renforts latéraux



Support pour doigt adaptable



Fixation du pouce réglable de manière individuelle



Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons



Fermeture «velcro» avec arrêt anti-retour

INDICATIONS

- Applications post-traumatiques (lésions multiples, complexes dans la zone des doigts / de la main)
- Traitement pré-opératoire et post-opératoire, par ex. maladie de Dupuytren, fractures métacarpiennes
- Lésions ligamentaires complexes dans la zone des doigts / de la main en raison d'un traumatisme
- Hémiplégies
- Tendovaginite (aiguë)
- Luxations / Contusions

AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- Stabilisation du poignet, de l'avant-bras et des doigts, pouce y compris
- Positions de correction réglables pour réduire les douleurs et éviter les dommages liés à l'immobilisation
- Immobilisation du poignet grâce à des renforts en aluminium ajustables
- Mise en place facile de l'orthèse avec une seule main grâce à des fermetures «velcro» très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur les sangles
- Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons pour une plus grande longévité et une esthétique améliorée, au niveau du coude, la peau plus sensible est protégée par un rembourrage / un revêtement moelleux

LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Zone confort
- + Mise en place facilitée
- + Adaptable selon les pathologies
- + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris: titane

Modèles: à droite, à gauche

CONSEILS D'UTILISATION

- Le support pour doigt est livré en position neutre et peut être rapidement mis en forme et sans outils en position Intrinsic-Plus
- La baleine métacarpienne avec fentes d'aération, les renforts latéraux et les étriers en aluminium sont ajustables individuellement
- Soutien favorable pour la kinésithérapie et mobilisation pendant le processus de guérison grâce à un support pour doigt et une ouverture pour le pouce amovibles

| TAILLE | 0 | 1 | 2 | 3 | RÉFÉRENCE |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Circonférence poignet (cm) | 12 – 15 | 14 – 18 | 17 – 21 | 20 – 26 | 128 5347 0080 +0° |
| ACL droit | 4046445911415 | 4046445911422 | 4046445911439 | 4046445911446 | |
| ACL gauche | 4046445911453 | 4046445911460 | 4046445911477 | 4046445911484 | |

+ = modèle (6) à droite
(7) à gauche
° = taille (0 – 3)


Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie.
Lire la notice d'instructions avant utilisation.

BASE DE REMBOURSEMENT LPPR

94,40 €

Valable uniquement en France

Code LPPR: 7149082

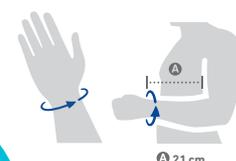

recommandé à partir d'une longueur d'avant-bras de 21 centimètres, mesurée à partir du poignet