


ManuLoc® Rhizo

Immobilisation poignet / pouce avec ouverture pour le pouce, abduction / adduction possible



Baleine métacarpienne et renforts latéraux

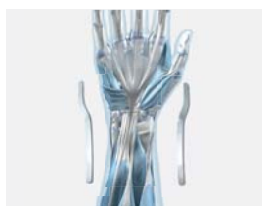

Fixation du pouce réglable de manière individuelle



Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons



Fermeture «velcro» avec arrêt anti-retour

INDICATIONS

- États inflammatoires aigus, post-traumatiques et post-opératoires du poignet et du rayon du pouce
- Applications pré-opératoires
- Tendovaginite radiale (modérée)
- Rhizarthrose (grave)
- Syndrome du canal carpien (léger)
- Luxations / Contusions
- Lésion ligamentaire dans la zone des doigts / de la main

AVANTAGES ET MODES D'ACTION

- L'orthèse empêche les faux mouvements de la région proximale et distale du poignet ainsi que de l'articulation métacarpo-phalangienne et carpo-métacarpienne du pouce
- Immobilisation du poignet grâce à des renforts en aluminium ajustables
- Stabilisation du poignet en position fonctionnelle grâce à une baleine métacarpienne anatomique préformée
- Mise en place facile de l'orthèse avec une seule main grâce à des fermetures «velcro» très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur les sangles
- Finition des bords avec technique de soudure par ultrasons pour une plus grande longévité et une esthétique améliorée

LES PLUS DE BAUERFEIND

- + Utilisation simplifiée
- + Agréable à la peau et perspirant
- + Zone confort
- + Mise en place facilitée
- + Adaptable selon les pathologies
- + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : à droite, à gauche

CONSEILS D'UTILISATION

- La baleine métacarpienne avec fentes d'aération, les renforts latéraux et les étriers en aluminium sont ajustables individuellement
- Durant le traitement, il est possible de mettre en place une dynamisation croissante du pouce et de retirer entièrement l'ouverture pour le pouce

TAILLE	0	1	2	3	RÉFÉRENCE
Circonférence poignet (cm)	12-15	14-18	17-21	20-26	120 5345 0080 +0°
ACL droit	4046445428920	4046445428937	4046445428944	4046445791222	
ACL gauche	4046445433450	4046445428951	4046445428968	4046445791239	

+ = modèle (6) à droite, (7) à gauche
° = taille (0-3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l'assurance maladie.
Lire la notice d'instructions avant utilisation.



BASE DE REMBOURSEMENT LPPR

79,20 €

Valable uniquement en France

Code LPPR: 7149076